

SMARTPHONE- FOTO'S OP JE SPRAAK- COMPUTER

Via Google Drive



Met dit document hopen we:

dat je begeleiders foto's en video's die ze maakten met hun smartphone, kunnen delen met je spraakcomputer (SC).

Deze foto's en video's kunnen automatisch verschijnen in je 'Fotoalbums'- en 'Films'-document binnen Mind Express 5.



Doel:

Vlotte toegang tot foto's (en video's) van je omgeving, om deze te kunnen inzetten voor ondersteunde communicatie, vrijetijdsbesteding en andere toepassingen.

Manier:

Het Google account van de begeleider en van de O.C.-gebruiker linken en synchroniseren met de spraakcomputer (SC).

Het vraagt aanvankelijk heel wat stappen, om alles uit te rollen.

Vervolgens bespaart het de teamleden van de O.C.-gebruiker echter heel wat handelingen (bv. via USB-stick, mail, WeTransfer ...) om foto's op de spraakcomputer (SC), in ME5, te visualiseren.

Wil je dat je nieuwe foto's automatisch verschijnen in het foto-album op de spraakcomputer (SC)?

Zorg ervoor dat de SC WIFI-connectie heeft, zodat de foto's zeker gesynchroniseerd worden tussen jouw smartphone en het album binnen ME5.

- Nog geen Google accounts voor ME5? ————— Pagina 2
- Google account SC: album aanmaken ————— Pagina 3
- Google account SC: synchroniseren met de SC ————— Pagina 5
- Album/map delen met je begeleider ————— Pagina 10
- Foto's op je smartphone: uploaden naar de SC ————— Pagina 11
- Foto's visualiseren in ME5 ————— Pagina 13

Heb je al Google accounts voor back-ups & het bewerken op afstand van je ME5 profiel?

Nee? Volg onderstaande stappen, indien gewenst.

Ja? Dan kan je overwegen om deze ook te gebruiken voor het uitwisselen van foto's en video's.



Je profiel als back-up in de cloud

1.

Maak een Google Account aan voor de O.C-gebruiker

Dit account:

- Mag **niet** hetzelfde zijn als dit van de bewerkers op afstand.
- Mag niet vol zijn. Er moet **voldoende opslagruimte** zijn, zeker als je dit ook gaat gebruiken voor foto's (en video's.)

2.

Log in met dit account binnen het ME5-profiel van de gebruiker. Werkwijze in [deze instructievideo](#).






Bewerken op afstand

1. Maak een Google account aan voor de persoon die zal “Bewerken op afstand”.

Dit account:

- Mag **niet** hetzelfde zijn als dit van de O.C.-gebruiker (waarin de volledige back-up staat).
- Mag niet vol zijn. Er moet **voldoende opslagruimte** zijn, zeker als je dit ook gaat gebruiken voor foto's (en video's.)
- Laat toe om communicatiekaarten, maar niet de instellingen, van de O.C.-gebruiker te bewerken.

2. Voeg dit Gmail-adres toe aan de lijst met “Bewerkers op afstand”, volgens [deze werkwijze](#).

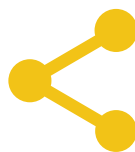

GOOGLE ACCOUNT


VAN DE O.C.-GEBRUIKER (ONLINE)



Maak een map aan, waarin je foto's zal delen. Maak hierin ook submappen aan, als je de foto's wil organiseren in fotoalbums.

In de internetbrowser
(bv. op de spraakcomputer)

In de Google account van de O.C.-gebruiker

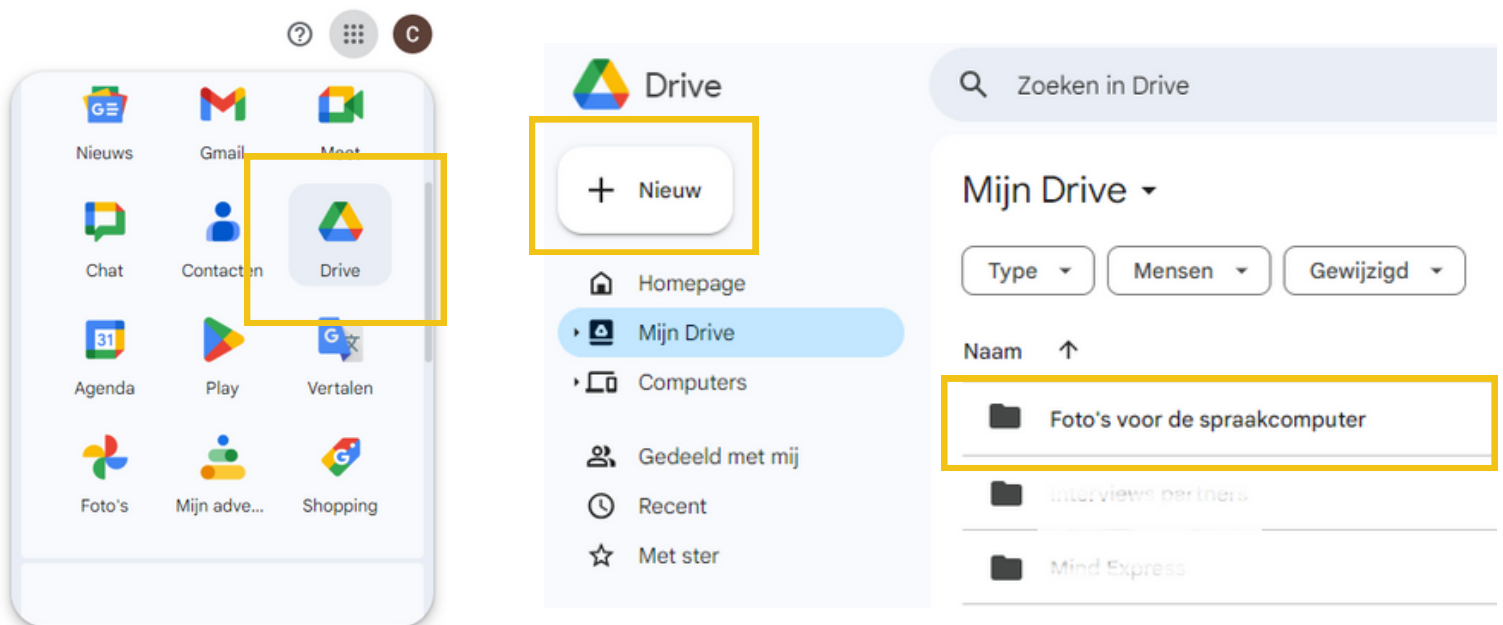



Synchroniseer deze Google Drive van de O.C.-gebruiker met de spraakcomputer.

1. Download Google Drive voor desktop op de spraakcomputer

Maak een back-up van je herinneringen

Voor computers


Download Google Drive voor desktop

Gebruik Google Drive om automatisch een back-up te maken van foto's op je computer naar Google Foto's

Downloaden


Windows 10 +

2.

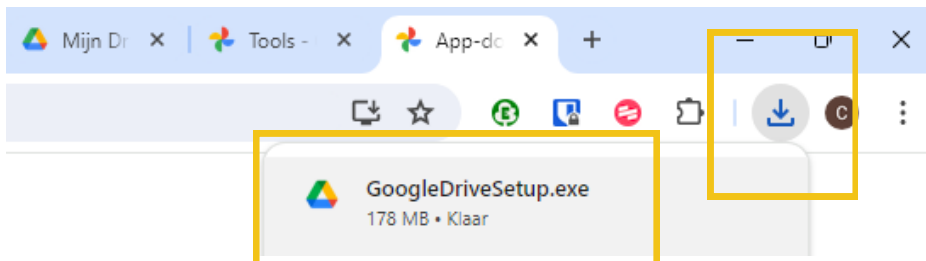


GOOGLE DRIVE


OP JE SPRAAKCOMPUTER

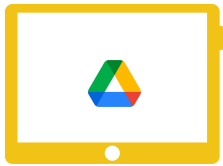


3.

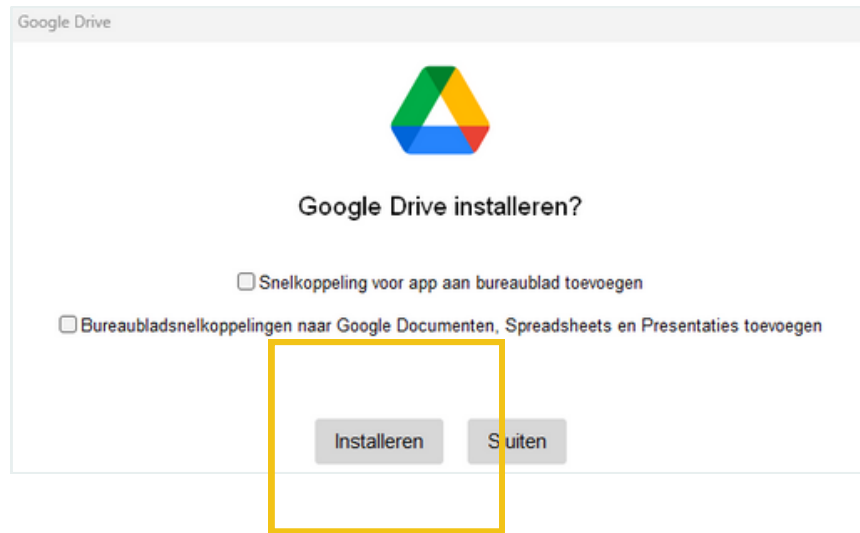


4.

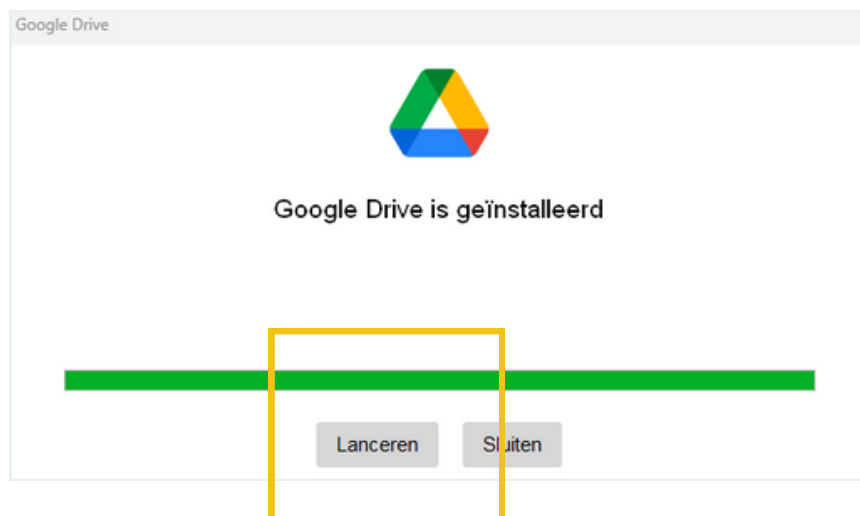

5.

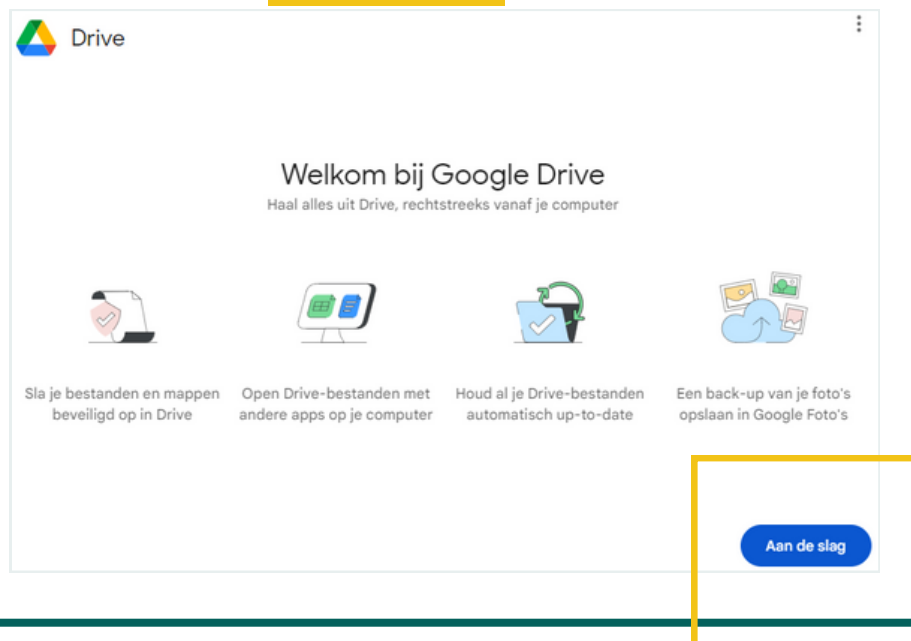


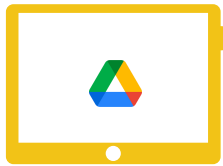


GOOGLE DRIVE

OP JE SPRAAKCOMPUTER


6.

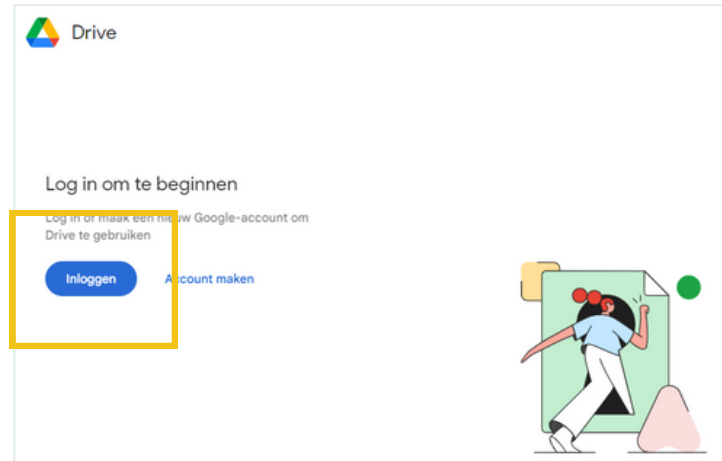


7.

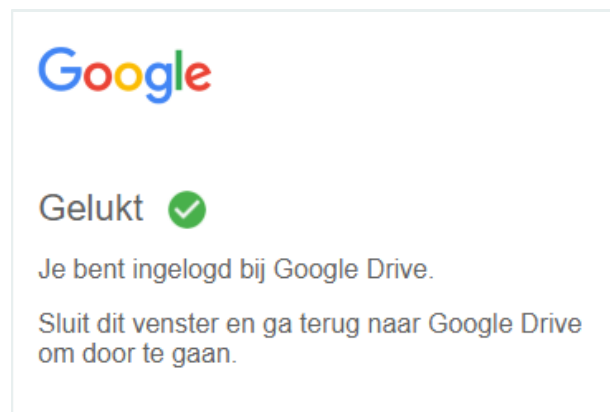

8.

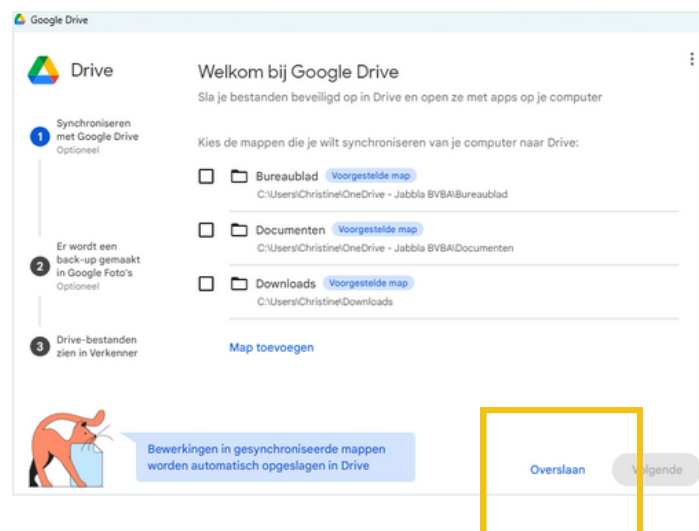

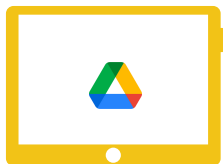

9.

Verschillen tussen synchronisatie met Google Drive en back-ups in Google Foto's



Synchroniseren met Drive

Je bewerkingen worden automatisch gesynchroniseerd



Back-up maken in Foto's

Behandelt bewerkingen als nieuwe bestanden

OK

10.



Drive

Een back-up van foto's en video's maken in Google Foto's

Daarnaast kun je mappen kiezen waarvan je een back-up wilt maken in Google Foto's

1 Synchroniseren met Google Drive Overgeslagen

2 Er wordt een back-up gemaakt in Google Foto's Optioneel

3 Drive-bestanden zien in Verkenner

☐ Afbeeldingen [Voorgestelde map](#)
C:\Users\Christine\OneDrive - Jabbla BVBA\Afbeeldingen

☐ Videos [Voorgestelde map](#)
C:\Users\Christine\Videos

[Map toevoegen](#)



Als je foto's of video's bewerkt op je computer wordt er een back-up van gemaakt als nieuwe bestanden

Overslaan

erug

Volgende

11.



Drive


Je hebt nu met één keer klikken toegang tot je Drive-bestanden via Verkenner

Je bestanden worden getoond in Verkenner zonder dat ze ruimte in beslag nemen op de harde schijf

• 2 bestanden en 3 mappen in Mijn Drive



→ [Verkenner openen om Drive-bestanden te bekijken](#)

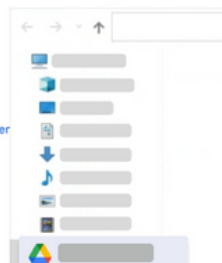


Terug


Volgende

GOOGLE DRIVE


OP JE SPRAAKCOMPUTER

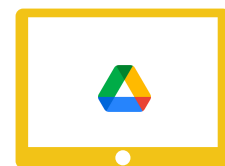

Resultaat in de Verkenner van de spraakcomputer:

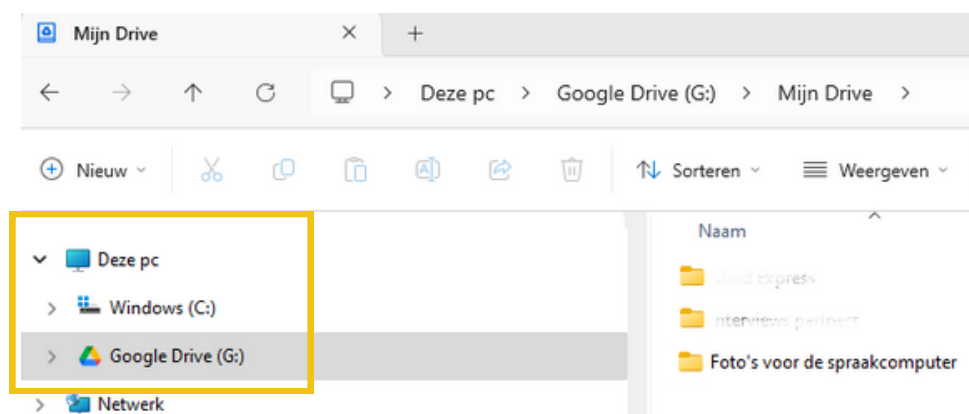

Synchroon met de inhoud in Google Drive (online):

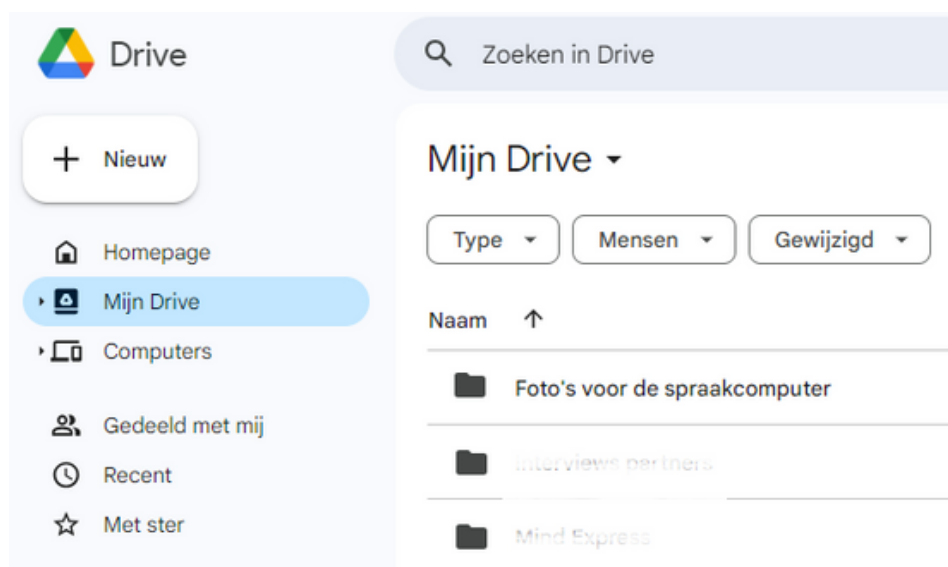

MAP VAN GEBRUIKER

DELEN MET ACCOUNT VAN BEGELEIDER



+ Deel de map met de Google account van de begeleider.



delen

Account begeleider

Personen met toegang

C

Account O.C.-gebruiker

Eigenaar

Algemene toegang

Beperkt

Alleen mensen met toegang kunnen dit openen via de link

Link kopiëren

Klaar


MAP VAN GEBRUIKER

VIA SMARTPHONE BEGELEIDER






Maakte de begeleider foto's via de smartphone?
Dan kunnen deze foto's geüpload worden in
Google Drive.

1. Op de smartphone van de begeleider:

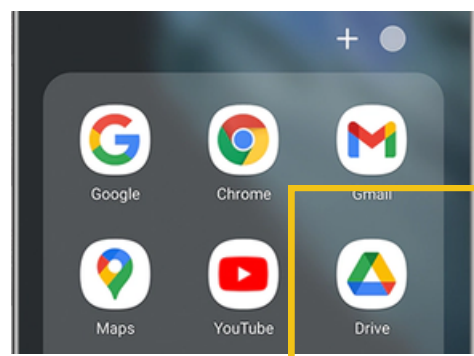


2. Gemaakte foto's uploaden in de gedeelde map:

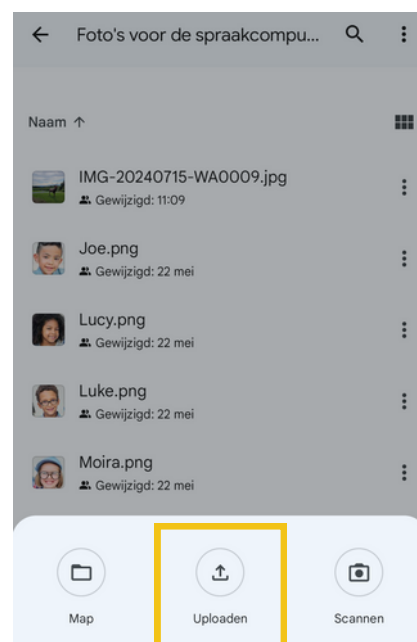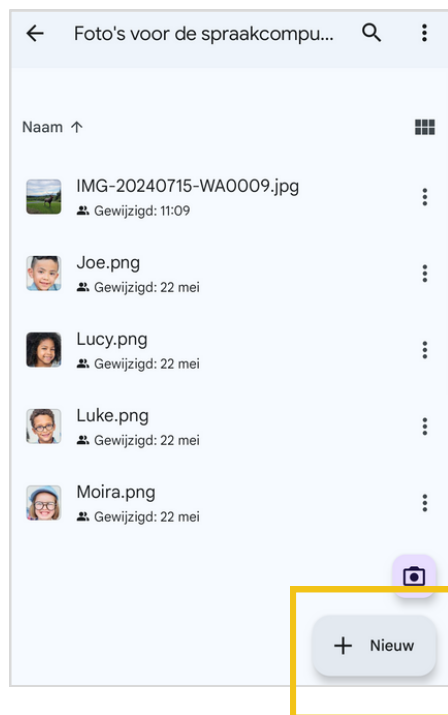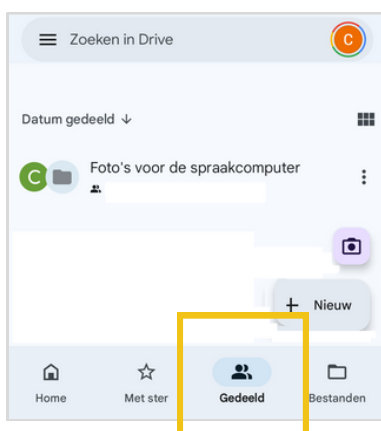


MAP VAN GEBRUIKER

VIA SMARTPHONE BEGELEIDER

Resultaat in de Verkenner van de spraakcomputer (indien WIFI):

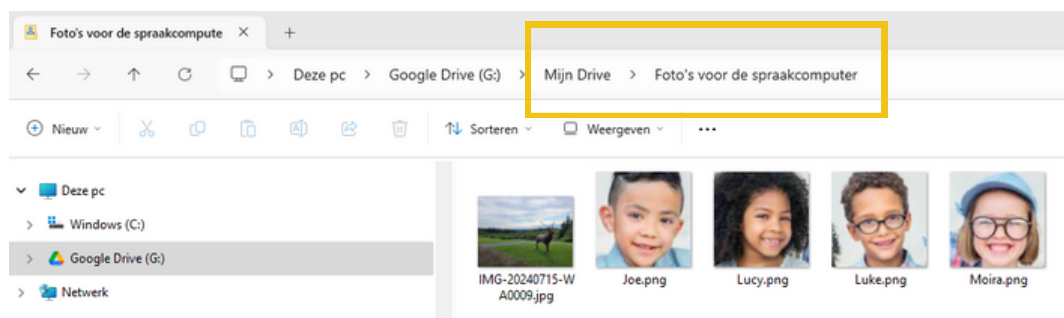

Synchroon met de inhoud in Google Drive (online):

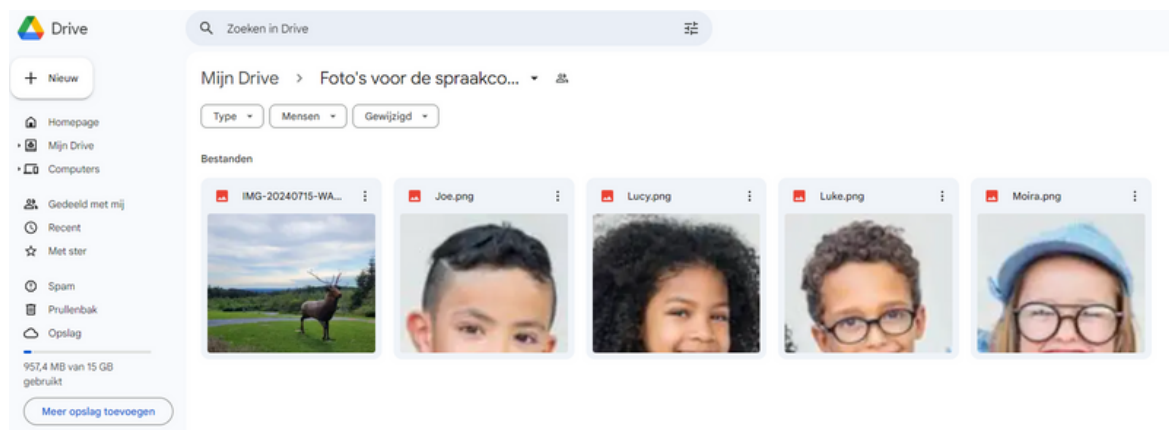


MAP WEERGEVEN

IN MIND EXPRESS 5 DOCUMENT



Maak de foto's zichtbaar in je Mind Express 5 document, via de functionaliteit "Diavoorstelling" (1).

Voorbeelddocument:

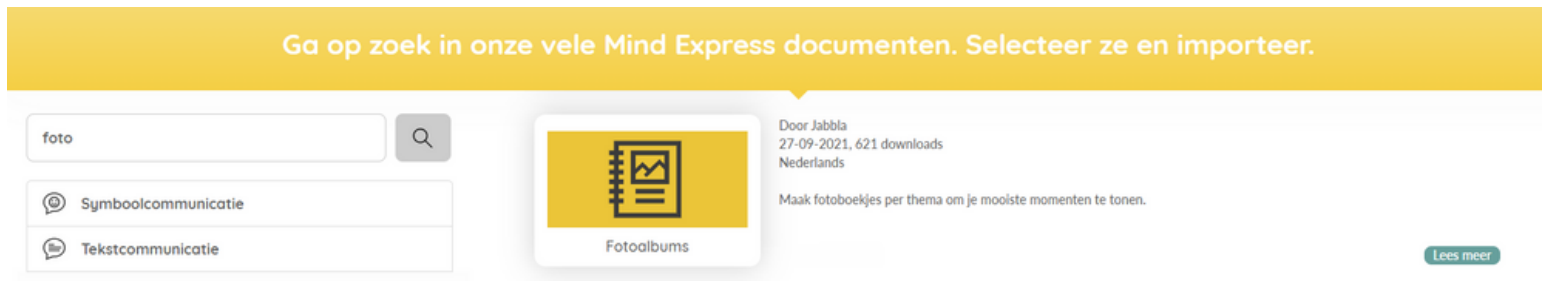

Voorbeelddocument:

Meer info over de werkwijze in het document zelf.




MAP WEERGEVEN

IN MIND EXPRESS 5 DOCUMENT



Maak de foto's zichtbaar in je Mind Express 5 document, via de functionaliteit "Diavoorstelling" (2).

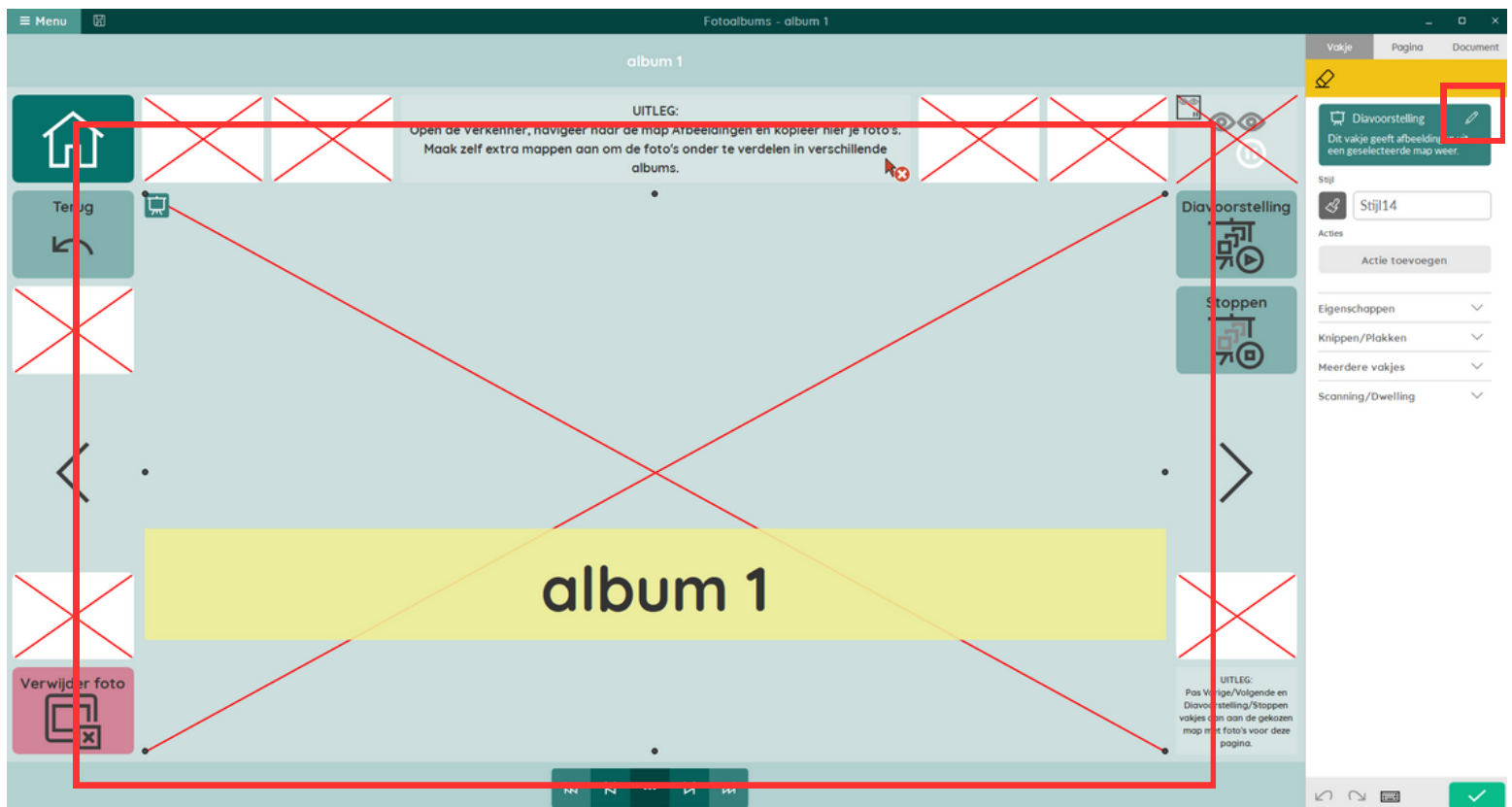

MAP WEERGEVEN

IN MIND EXPRESS 5 DOCUMENT



Maak de foto's zichtbaar in je Mind Express 5 document, via de functionaliteit "Diavoorstelling" (3).


Kies een map die afbeeldingen bevat. De actie werkt op vakjes die afbeeldingen weergeven uit deze map.

Lees bestandsnaam:

Foto's voor de spraakcomputer

☒ Ja

...

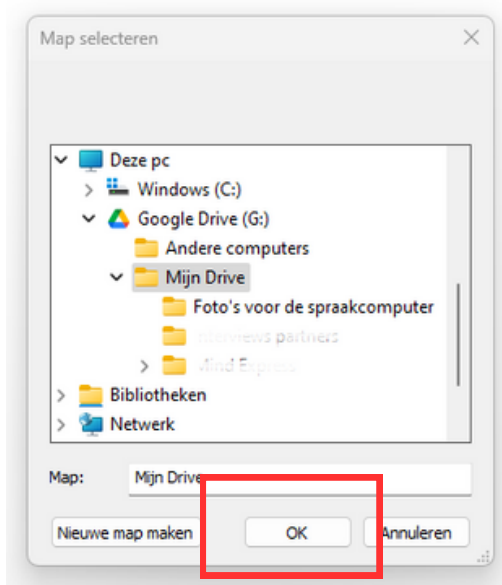

OK



jabblo

We all have a voice